

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА НА КОЛОРИМЕТРЕ КНС-2


ГОСТ 25337—82

Издание официальное

БЗ 10—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

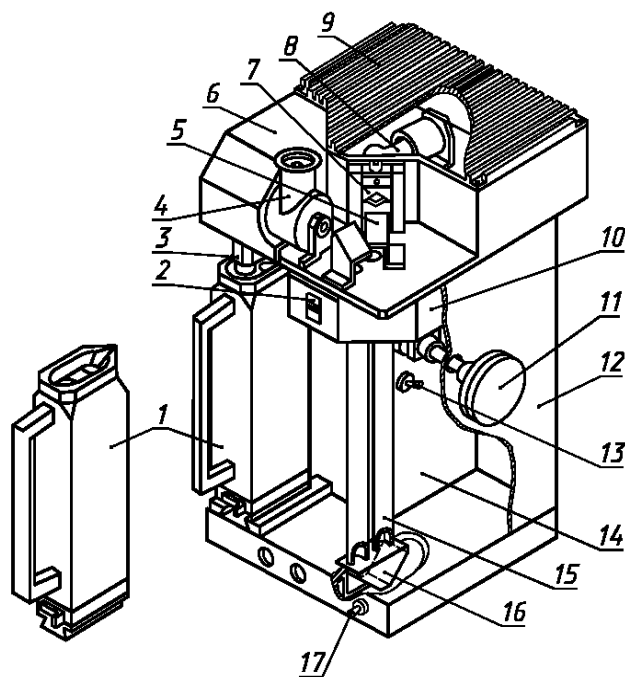

1 — кювета; 2 — визирное окно; 3 — каретка; 4 — окуляр; 5 — зеркало; 6, 12 — кожух; 7 — диафрагма;
8 — осветитель; 9 — крышка; 10 — блок светофильтров; 11 — рукоятка; 13, 17 — тумблер;
14 — корпус; 15 — эталонный канал; 16 — призма

Черт. 2

Стакан номинальной вместимостью не менее 250 см³ в любом исполнении по ГОСТ 25336 или стакан 3 (4, 5) по ГОСТ 9147.

Термометры по нормативной документации.

Нефрас-С50/170 по ГОСТ 8505.

Любой бесцветный бензин или бензиновые алкилатные фракции (для мойки кюветы).

Вода дистиллированная с pH 5,4—6,6.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Бумага фильтровальная лабораторная марок ФНБ или ФНС по ГОСТ 12026.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Проверяют чистоту оптических стекол прибора и кюветы. При необходимости кювету промывают бензином и сушат струей чистого сухого воздуха. Оптические стекла промывают спиртом и протирают чистой, неворсистой салфеткой.

2.2. Чистую сухую кювету устанавливают в прибор. Включают колориметр в электросеть, при этом включаются зеленая и красная индикаторные лампочки. Зеленая индикаторная лампочка сигнализирует о включении прибора в электрическую сеть, красная — о включении кюветы на термостатирование. При достижении рабочей температуры кюветы красная лампочка автоматически отключается. Периодическое включение и выключение красной лампочки сигнализирует о поддержании в кювете температуры $(75 \pm 5)^\circ\text{C}$.

2.3. Пробу парафина в количестве 130—140 г (для одного определения) помещают в химический стакан и расплавляют в термостате или масляной бане при $(90 \pm 5)^\circ\text{C}$. Периодически пробу

парафина перемешивают термометром или стеклянной палочкой до полного расплавления. Если расплавленная проба парафина мутная или содержит механические примеси, мешающие определению цвета, ее фильтруют через фильтровальную бумагу. Допускается фильтровать парафин под вакуумом. Температура пробы парафина перед заливом в кювету колориметра должна быть $(75 \pm 2)^\circ\text{C}$.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. После прогрева кюветы ее быстро выдвигают из гнезда колориметра, заливают в кювету расплавленный парафин до верхнего среза выемки расширенной части кюветы и устанавливают кювету в рабочее положение. Нажатием на рычаг каретки опускают ее в нижнее положение так, чтобы защитное стекло было погружено в испытуемый продукт. После достижения в кювете рабочей температуры (красная лампочка отключена) приступают к определению цвета.

3.2. С помощью рукоятки вращают барабан со светофильтрами и, наблюдая в окуляр, вводят в эталонный канал поочередно светофильтры (начиная с нулевого) до тех пор, пока цветовые поля испытуемого парафина и светофильтра совпадут или пока цвет испытуемого парафина будет находиться между цветовыми оттенками двух близлежащих светофильтров. Проводят два последовательных определения.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Цвет парафина выражают в условных единицах (условных марках), соответствующих номеру светофильтра цветовой шкалы колориметра КНС-2 (приложение).

4.2. Если парафин имеет промежуточный цвет двух светофильтров, за результат испытания принимают цвет по светофильтру с более интенсивной окраской. Если проба парафина была профильтрована, в документе о качестве необходимо записать: «Проба профильтрована через фильтровальную бумагу».

4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1 (Исключены, Изм. № 1).

5. ТОЧНОСТЬ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ

5.1. С х о д и м о с т ь

Два результата испытания, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает одну условную единицу цветовой шкалы колориметра КНС-2.

5.2. В о с п р о и з в о д и м о с т ь

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает двух условных единиц цветовой шкалы колориметра КНС-2.

Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ЗНАЧЕНИЯ КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПУСКАНИЯ

Номер светофильтра	Координаты цветности		Коэффициент пропускания (интегральный)
	красный	зеленый	
1	0,317±0,002	0,328±0,003	91,4±3,0
2	0,323±0,002	0,338±0,003	90,7±3,0
3	0,329±0,003	0,348±0,004	90,1±3,0
4	0,337±0,003	0,361±0,005	89,5±3,0
5	0,345±0,003	0,372±0,006	88,7±3,0
6	0,360±0,003	0,396±0,007	87,2±3,5
7	0,385±0,006	0,417±0,006	81,8±3,0
8	0,415±0,006	0,440±0,008	70,7±3,0
9	0,435±0,006	0,451±0,006	64,1±3,0
10	0,463±0,006	0,462±0,006	54,3±3,0
11	0,500±0,006	0,464±0,006	40,7±4,0
12	0,520±0,008	0,451±0,005	30,6±4,0
13	0,548±0,006	0,439±0,005	22,3±3,5
14	0,564±0,006	0,428±0,005	17,8±3,5
15	0,586±0,006	0,410±0,005	12,1±3,5
16	0,603±0,006	0,395±0,006	8,4±2,2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н. Переверзев, Р.А. Мартиросов, Г.И. Успенский, В.П. Гладышев, Л.П. Переверзева, Н.Ф. Ковалева, В.С. Иванов, А.Г. Муравьев, П.А. Меньков, В.Н. Логинов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.82 № 2702

Изменение № 2 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Белоруссии
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8505—80	1
ГОСТ 9147—80	1
ГОСТ 12026—76	1
ГОСТ 18300—87	1
ГОСТ 25336—82	1

4. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1987 г., августе 1995 г. (ИУС 1—88, 11—95)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*
Корректор *Н.И. Гавришук*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 06.04.98. Подписано в печать 27.04.98. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-издл. 0,40.
Тираж 127 экз. С 527. Зак. 361.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6
Цлр № 080102